



Rotational Atherectomy & Thrombectomy Device

Dispositivo de aterectomia rotacional e trombectomia






**Configuração exclusiva
da ponta do cateter para
remoção de material
calcificado**

Unique catheter tip configuration
for removal of calcified material

**Não há necessidade
de passar a oclusão
com fio-guia**

No need to pass the occlusion
with a guidewire

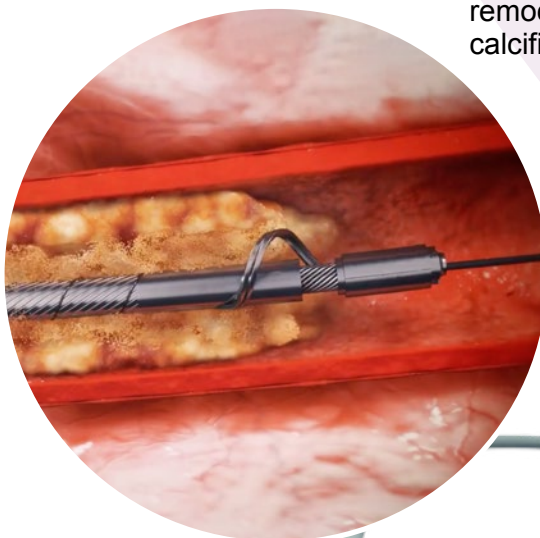

Fast and easy set up


Configuração rápida e fácil

No capital equipment required

Não requer equipamento

ASSITIR O VIDEO

WATCH VIDEO

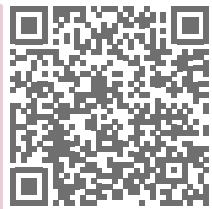

ROTATIONAL ATHERECTOMY & THROMBECTOMY DEVICE

Dispositivo de aterectomia rotacional e trombectomia

BYCROSS is a 6F bi-directional rotational atherectomy & thrombectomy device that is inserted into the peripheral arterial vascular system via a guidewire and an introducer sheath to restore chronically occluded vessels.

BYCROSS é um dispositivo de aterectomia rotacional bidirecional e trombectomia rotacional 6F que é inserido no sistema vascular arterial periférico por meio de um fio-guia e uma bainha introdutora para restaurar vasos cronicamente ocluídos.

- The BYCROSS catheter consists of a coaxial, flexible, rotating shaft with an expandable tip. The BYCROSS device is battery powered. The calcified material is aspirated via an integrated pump and discharged into a collection bag.

O cateter BYCROSS consiste em uma haste coaxial, flexível e rotativa com ponta expansível. O dispositivo BYCROSS é funciona por bateria. O material calcificado é aspirado através de uma bomba integrada e descartado em uma bolsa coletora.

Informações Adicionais

FACTS & FIGURES

Código	Art. No.	Description	Descrição	VE
	BC213-50	BYCROSS 6F 50CM		1
	BC213-70	BYCROSS 6F 70CM		1
	BC213-95	BYCROSS 6F 95CM		1

Em combinação com outros dispositivos/não incluídos:

In combination with other devices / not included:

Dispositivo	Device	Description	Descrição
Fio Guia	Guidewire	Standard 0,035" (0,89 mm) Guidewire in appropriate length	
Seringa	Syringe	Standard-Luer-Syringe	
Bainha introdutora	Guiding Sheath	Stainless Steel reinforced 6F / 7F Guiding Sheath in appropriate length	

Fio-guia padrão de 0,035" (0,89 mm) em comprimento apropriado

Seringa Luer Padrão

Bainha guia 6F / 7F aramada em comprimento apropriado



BYCROSS is a trademark of TARYAG Medical Ltd.

Germany

plus medica GmbH & Co. KG
Willstätterstraße 13
40549 Düsseldorf
Germany
Tel: +49 211 54 59 08 80
kundenservice@plusmedica.de
info@plusmedica.de
www.plusmedica.de

Austria

plus medica GmbH
Klingerstraße 9
2353 Guntramsdorf
Austria
Tel: +43 1 50 32 585
kundenservice@plusmedica.at
info@plusmedica.at
www.plusmedica.at

Switzerland

plus medica AG
Oberwilerstraße 12
8442 Hettlingen
Switzerland
Tel: +41 52 316 44 36
kundenservice@plusmedica.ch
info@plusmedica.ch
www.plusmedica.ch

Sweden

plus medica Nordic AB
Lövsjögsvägen 12
70376 Örebro
Sweden
Tel: +46 70 588 70 91
gzivkovic@plusmedica.se
www.plusmedica.se

TARYAG Medical Ltd.

14 Ha'Ilan St. Or Akiva,
3065101 Israel
Tel: +972.4.6776929
Fax: +972.77.3180728
info@taryag-medical.com
www.taryag-medical.com

